

i-Optik

Tầm nhìn rõ hơn, cuộc sống tốt hơn

CV-7800

HOÀN TOÀN MỚI

Kết nối không dây

Máy đo thị lực vi tính



Thông số kỹ thuật

Phạm vi đo lường

Độ cầu	-29,00D ~ + 26,75D (chế độ tiêu chuẩn) -19,00D ~ + 16,75D (kiểm tra hình trụ chéo hoặc lăng kính) (0,25D / 0,50D / 1,00D / 3,00D)
Độ trụ:	Độ tăng -8,75D- + 8,75D (0,25D / 1,00D)
Độ trục:	Độ tăng 0-180 ° (1757150)
PD:	Tầm nhìn xa 48 ~ 80mm, tầm nhìn gần 48 ~ 76mm, Độ tăng 0,5mm Khoảng cách làm việc tầm nhìn gần: 35 ~ 70cm
Lăng kính quay:	Độ tăng 0-20Δ (0,1A / 0,5A / 1A / 2A)
Hình trụ chéo Jackson:	± 0,25D, ± 0,50D
Hình trụ chéo đôi (lăng kính chia đôi):	± 0,25D
Thấu kính hình cầu cho kính võng mạc:	+ 1,50D (ở khoảng cách 67cm), + 2,00D (ở khoảng cách 50cm)

Ống kính phụ trợ

Tám lỗ gắn chốt:	Ø2mm
Thanh Maddox Rod:	Mắt phải: đỏ / ngang, Mắt trái: đỏ / dọc
Bộ lọc màu đỏ/ xanh lá cây:	Mắt phải: đỏ, Mắt trái: xanh lục
Bộ lọc phân cực tuyến tính:	Mắt phải: 135745 °, Mắt trái: 457135 °
Bộ lọc phân cực tròn: Lăng kính phân chia:	Mắt phải/ mắt trái
Ống kính PD:	Mắt phải (3ΔBU, 6ΔBU), Mắt trái (3ΔBD, 10ΔBI)
Ống kính hình trụ chéo cố định:	Hai mắt (chéo)
Tám lỗ gắn chốt:	± 0,50D (trục cố định ở 90°)

Kích thước sản phẩm

Đầu bộ khuếch đại:	376mm*297mm*95mm, 3,8Kg
Bàn phím hoạt động:	203mm*210mm*145mm
Nguồn cấp điện:	AC220/50HZ hoặc AC110V/60HZ, 90W

Nhằm cải tiến sản phẩm, thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Ningbo Ming Sing Optical R&D Co.,Ltd

ĐT: +86 574 87305541

E-mail: webmaster@nbmingsing.com

Website: www.nbmingsing.com

Địa chỉ: Số 702, Đường North Tian Tong, Ningbo, Chiết Giang, CHND Trung Hoa



NHANH HƠN BAO GIỜ HẾT YÊN TĨNH HƠN BAO GIỜ HẾT

Máy đo thị lực vi tính CV-7800 HOÀN TOÀN MỚI

Nhờ hệ thống điều khiển động cơ và điện thế hệ mới, CV-7800 có phạm vi đo rộng hơn và tốc độ chuyển đổi ống kính nhanh hơn so với các sản phẩm trước đây của chúng tôi. Nó cũng giúp giảm tiếng ồn khi vận hành và cải thiện đáng kể hiệu suất tổng thể của máy.



Siêu nhanh

Tốc độ chuyển đổi ống kính nhanh hơn, giúp quá trình khởi động khởi động chưa đến 7 giây.



Siêu yên tĩnh

Tiếng ồn trong quá trình chuyển đổi ống kính được kiểm soát tốt ở mức không ảnh hưởng đến phép đo.



Kết nối không dây

Kết nối không dây loại bỏ các hạn chế về không gian và giúp cho người vận hành sự linh hoạt hơn.



Công nghệ tiên tiến

Cung cấp cho bệnh nhân của bạn
trải nghiệm khúc xạ tốt nhất





Bố cục dễ vận hành

Giao diện ngắn gọn và thân thiện, dễ vận hành và có thể giúp người dùng đọc thông tin liên quan nhanh hơn.



Chế độ điều khiển 2 trong 1 mới

Điều khiển không dây của máy tính bảng mang lại trải nghiệm hoạt động linh hoạt. Đồng thời, bàn phím điều khiển cải tiến giúp trải nghiệm điều khiển tốt hơn nhiều, cải thiện độ tin cậy và sự thuận tiện của thao tác.




Sử dụng một mình máy tính bảng

Chọn chế độ này khi chúng ta muốn thoát khỏi những hạn chế về không gian và hoạt động linh hoạt hơn.



Máy tính bảng kết hợp với bàn phím

Ở chế độ này, chúng ta có thể vận hành máy theo cách truyền thống, phù hợp hơn khi ngồi, với giao diện sạc từ tính tích hợp, máy tính bảng có thể giữ đủ điện trong thời gian dài.

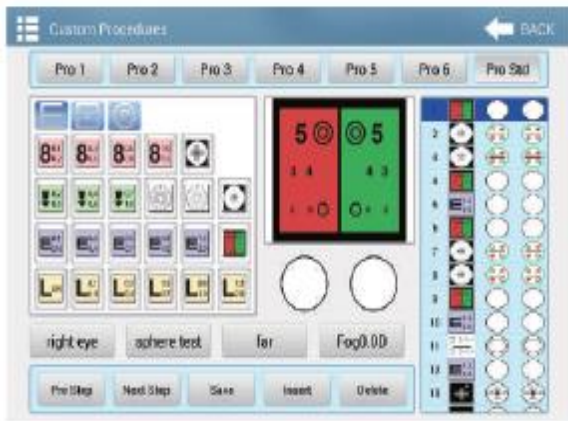

Chương trình khúc xạ tiêu chuẩn được cài đặt sẵn

Chương trình khúc xạ tiêu chuẩn được cài đặt sẵn có thể giúp việc đo thị lực phức tạp trở nên dễ dàng, người vận hành chỉ cần làm theo từng bước của chương trình.

Chương trình khúc xạ của riêng bạn

Có thể cài đặt tối đa 6 chương trình khúc xạ tùy chỉnh.

Một chương trình tùy chỉnh cho phép mỗi bác sĩ nhãn khoa vận hành theo thói quen của riêng mình.

THAM KHẢO VÀ TỰY CHỌN



CV-7800

Đầu máy kiểm tra thị lực VI tính
APP cho máy tính bảng (Và có hệ điều hành Android/iOS).




CM-1900P/CM-1900C

Màn hình biểu đồ 23 inch
Chức năng phân cực có sẵn (CM-1900P)



CM-2200

Biểu đồ tiết kiệm không gian

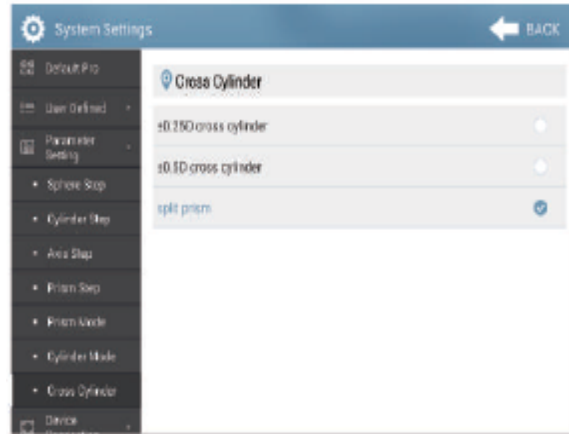

Được trang bị lăng kính phân chia

Bằng cách so sánh các hình ảnh trong cùng một màn hình, khách hàng sẽ dễ dàng đọc và trả lời hơn.

Trục loạn thị và công suất có thể được lấy chính xác và nhanh chóng.

Quản lý thông tin khách hàng hiệu quả

Truy cập các bản ghi khúc xạ lịch sử và lưu trữ các đợt kiểm tra mới một cách dễ dàng.



Bàn phím hoạt động

Máy tính bảng có nhiều kích cỡ có thể được lắp đặt



Máy tính bảng (Tùy chọn)

Có thể mua theo cấu hình đề xuất của chúng tôi




Máy in di động Bluetooth

A DURABLE PHOROPTER YOU CAN RELY ON **thiếu**



Được đúc kết từ 15 năm kinh nghiệm của i-Optik trong việc thiết kế và sản xuất Máy đo thị lực vi tính. Các thí nghiệm kiểm tra độ tin cậy dài hạn tại chỗ của chúng tôi cho thấy CV-7800 tồn tại hơn 60.000 chu kỳ khúc xạ.

Kết nối và truyền tải không dây

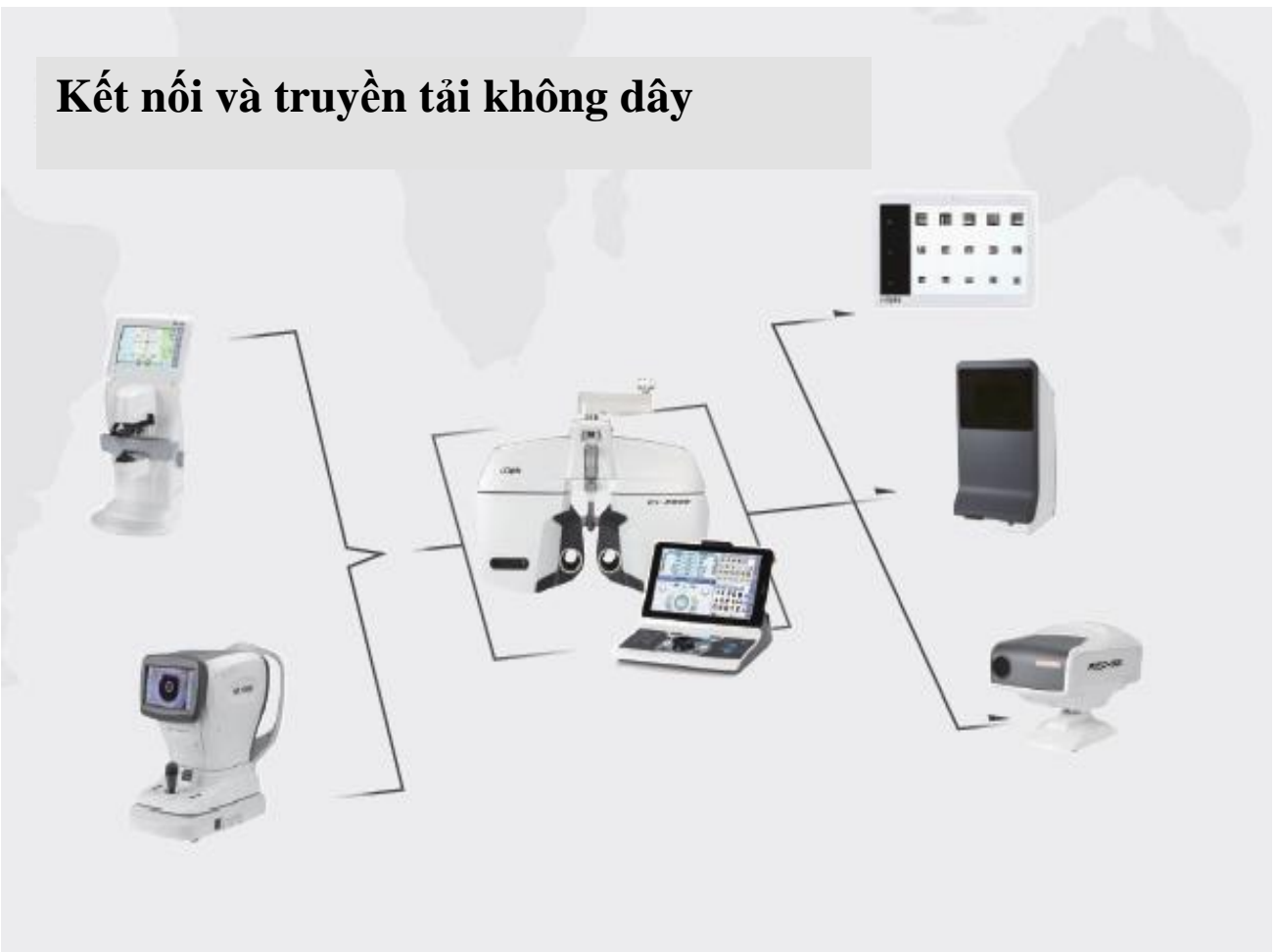

CÔNG TY MÁY LÀM MẮT KÍNH

Địa chỉ: 004 Lô U, Cư Xá Thanh Đa, Đường Thanh Đa, Phường 27, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế : 0313335734

HOTLINE: 0902 567 111

Website: <http://maylammatkinh.com/>

Email: cuadong102@gmail.com