

i-Optik

Tầm nhìn rõ hơn, cuộc sống tốt hơn

CM-2200

CÔNG TY MÁY LÀM MẮT KÍNH

Địa chỉ: 004 Lô U, Cư Xá Thanh Đa, Đường Thanh Đa, Phường 27, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế : 0313335734

HOTLINE: 0902 567 111

Website: <http://maylammatkinh.com/>

Email: cuadong102@gmail.com


Máy theo dõi Biểu đồ

Kiểu thiết kế tiết kiệm không gian





CM-2200 được tích hợp hệ thống phản xạ quang học độ nét cao, đảm bảo có thể thu được khoảng cách khúc xạ và góc nhìn tiêu chuẩn ngay cả trong một khoảng cách rất ngắn, giúp tiết kiệm đáng kể không gian khúc xạ, đồng thời, môi trường khúc xạ phòng tối mô phỏng của nó giúp đảm bảo độ chính xác của khúc xạ.

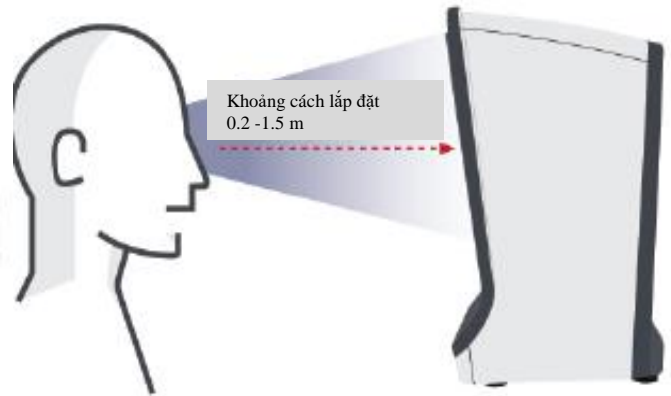

Điều khiển bằng máy tính bảng không dây

Chúng ta có thể sử dụng máy theo dõi biểu đồ với máy tính bảng kết hợp sau khi cài đặt APP của máy kiểm tra thị lực máy tính của chúng tôi.



Remote điều khiển từ xa

Hướng dẫn bằng đồ họa ngắn gọn, thuận tiện cho người dùng chọn nhanh các biểu đồ cần thiết,

Loại biểu đồ



Landolt C Tumbling E Số Chữ Trẻ em Cân bằng hai mắt Loạn thị



Soi nổi Kiểm tra soi nổi nổi với hình tam giác Kiểm tra Schober Trụ chéo Jackson Cross Kiểm tra mù màu Ishihara Cân bằng đỏ xanh Cân bằng đỏ xanh




Đồ thị chấm Loạn thị hình quạt xoay Kiểm tra sự trùng hợp Chéo Soi nổi Kiểm tra giá trị



Hệ thống đo thị lực hiệu quả

CM-2200 có thể được sử dụng không chỉ với điều khiển từ xa mà còn với máy đo thị lực vi tính CV-7800 của chúng tôi. Khi biểu đồ mong muốn được chọn trên máy tính bảng, biểu đồ của CM-2200 có thể được chuyển đổi ngay lập tức và các ống kính tương ứng trong CV-7800 có thể được tải đồng bộ.

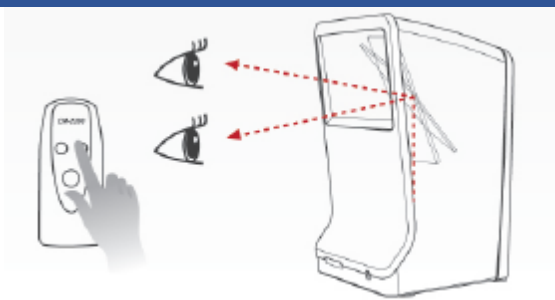

Có thể điều chỉnh góc màn hình

Góc của màn hình có thể được điều chỉnh dễ dàng bằng một remote điều khiển từ xa độc lập, cho phép mỗi bệnh nhân có thể xem biểu đồ đúng cách.



Khung màu đỏ / xanh lá cây

Khung màu đỏ / xanh lá cây được cung cấp để kiểm tra ống nhòm.

Thông số kỹ thuật

Màn hình tích hợp:	LCD 4,96 inch
Độ phân giải màn hình:	1920 * 1080
Độ nhạy biểu đồ:	0,05-2,0
Chế độ hiển thị:	Đơn, một dòng, một hàng, toàn màn hình
Khoảng cách lắp đặt:	20-150cm, 10cm mỗi bước 5m (khi khoảng cách lắp đặt là 80cm)
Khoảng cách khúc xạ:	Đỏ/ Xanh lục
Bộ lọc:	AC100-240V, 50HZ / 60HZ, 50VA
Nguồn điện cung cấp:	TẮT/ 5 phút
Chức năng tiết kiệm điện:	305 (R) x 350 (D) X560 (C) mm
Kích thước:	16,7kg
Trọng lượng:	LCD 4,96 inch

Nhằm cải tiến sản phẩm, thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Ningbo Ming Sing Optical R&D Co.,Ltd

CÔNG TY MÁY LÀM MẮT KÍNH

Địa chỉ: 004 Lô U, Cư Xá Thanh Đa, Đường Thanh Đa, Phường 27, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế : 0313335734

HOTLINE: 0902 567 111

Website: <http://maylammatkinh.com/>

Email: cuadong102@gmail.com